


CONTROL Y REPOSICIÓN BALAS DE OXÍGENO

Fecha de edición:
2010

Período de Vigencia:
2025

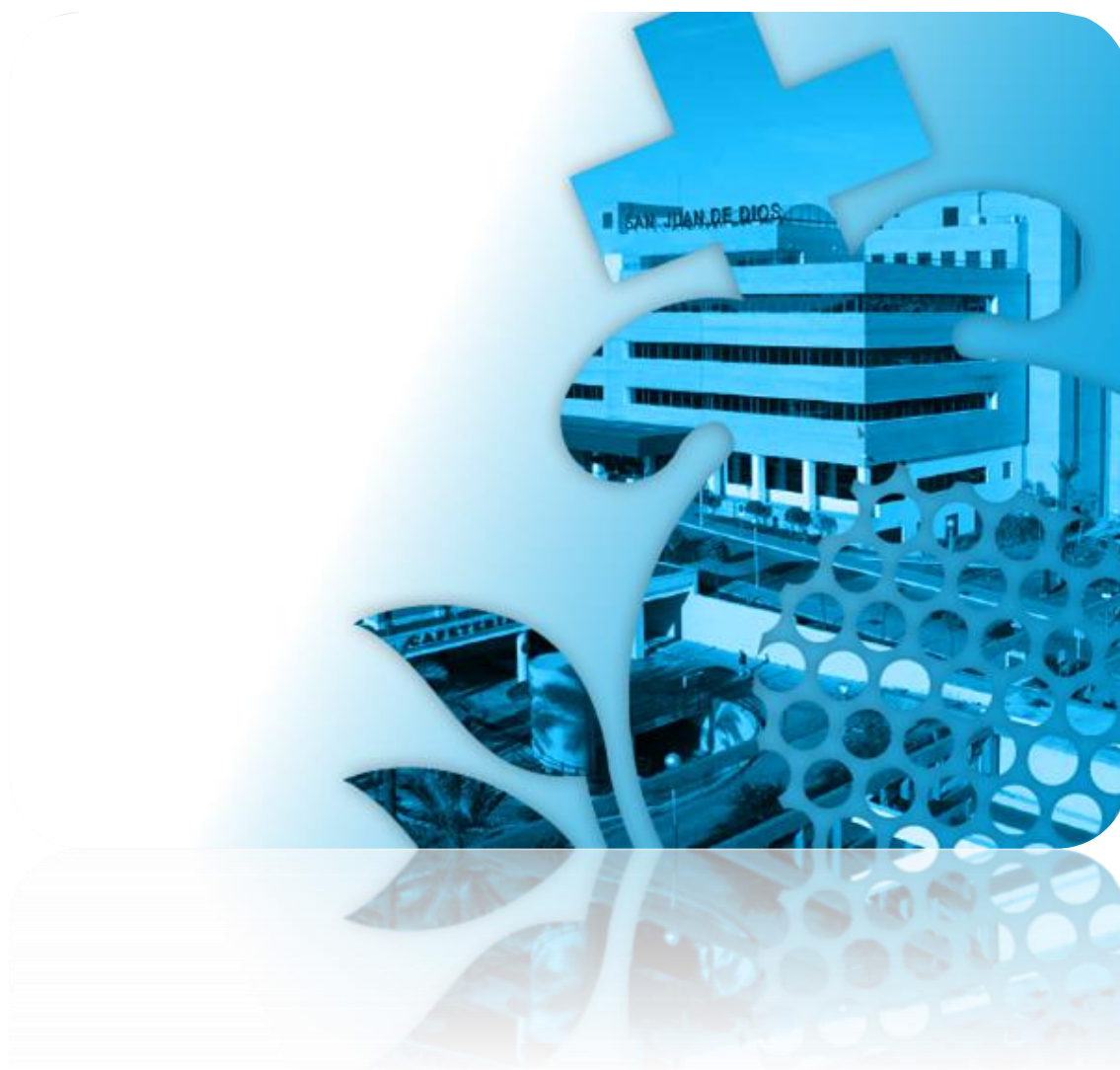

REVISIÓN	FECHA	RESUMEN DE LA REVISIÓN
2011	JULIO	
2023	JULIO	

Elaborado por: M^a Magdalena de Tovar
Fernández

Aprobado por:

Fecha: dd/mm/aaaa

Fecha: dd/mm/aaa

Contenido

AUTORES.	4
JUSTIFICACIÓN.	5
OBJETIVOS.	5
PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO.	5
POBLACIÓN DIANA / EXCEPCIONES	¡Error! Marcador no definido.
METODOLOGÍA.....	6
ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS.....	6
GLOSARIO / DEFINICIONES.....	¡Error! Marcador no definido.

AUTORES.

RESPONSABLE/COORDINADOR: APELLIDO / NOMBRE	TITULACIÓN	PUESTO QUE DESEMPEÑA	E-MAIL
M^a Magdalena de Tovar Fernández	DUE	Supervisora	Mariamagdalena.tovar@sjd.es

APELLIDOS/NOMBRE	TITULACIÓN	PUESTO QUE DESEMPEÑA
Pilar Rodríguez Lara	DUE	Coordinadora

JUSTIFICACIÓN.

La estandarización de la práctica, la normalización, se ha demostrado como un eslabón fundamental y necesario para asegurar una asistencia segura y eficaz, disminuyendo la variabilidad en la práctica y los circuitos.

OBJETIVOS.

- Normalizar el procedimiento de reposición de balas de oxígeno.
- Servir de instrumento de apoyo a los profesionales del SCCU y de los profesionales de nueva incorporación.
- Controlar la cantidad de balas de oxígeno .

PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO.

Personal de Enfermería del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.

RECURSOS MATERIALES

- Bala de oxígeno
- Soporte balas
- Porta carga

RECURSOS HUMANOS

- TCAE asignado al triaje.

METODOLOGÍA.

1. Comprobar el estado de las balas de oxígeno antes de las 10:00 horas por los TCAE responsables de esta función en cada puesto y en cada área.
2. Sustituir las balas de oxígenos vacías en el turno de mañana antes de las 10:00 horas en el triaje de adultos por el TCAE responsable de cada área.
3. Trasladar todas las balas de oxígeno vacías del almacén nº 2 al almacén general situado en la planta – 2 para su sustitución.
4. El TCAE responsable de esta función será el asignado al área de Triage y a primera hora del turno (10:00)
5. Colocarlas de nuevo en el triaje.
6. Anotar en el libro de registro. (anexo)
7. En caso de necesitar reponer balas de oxígeno fuera del horario de la mañana, se debe de avisar a seguridad para bajar al almacén de la -2 fuera del horario.

DISTRIBUCIÓN DE BOTELLAS DE O2 EN EL SERVICIO

PUESTO	Nº BALAS
Puerta	2
Emergencias	4
Preferente	1
Sala de espera	1
Consulta de enf	2
STC	2
Observación	2
Triage	20

OBSERVACIONES

1. El recambio de balas del SCCU es imprescindible para el buen funcionamiento del mismo.
2. Las balas de oxígeno deben de estar con la suficiente carga para ser utilizada en cualquier momento, pues se trata de un servicio donde la afluencia de patologías que requieren de aporte extra de oxígeno es muy elevada.
3. Antes de bajar llamar al 9700 para asegurarnos que hay alguien para recepcionar.

DIFUSIÓN

1. Existirá una copia accesible en el control de enfermería de la sala de espera de pacientes.
2. Se podrá acceder a él a través de la intranet en guías y procedimientos.

RESPONSABILIDAD

Será responsabilidad de la coordinadora del SCCU, la evaluación del cumplimiento de este protocolo y del personal asistencial la aplicación correcta de él.

Actualización

El presente documento deberá revisarse bianualmente. Será el Coordinador de Enfermería del área el responsable de dicha revisión. De no realizarse esta, se entenderá prorrogado.