




## GUÍA RÁPIDA MANEJO DEL FRIGORÍFICO

Fecha de edición: 01/08/2019

Período de Vigencia:  
01/08/2025

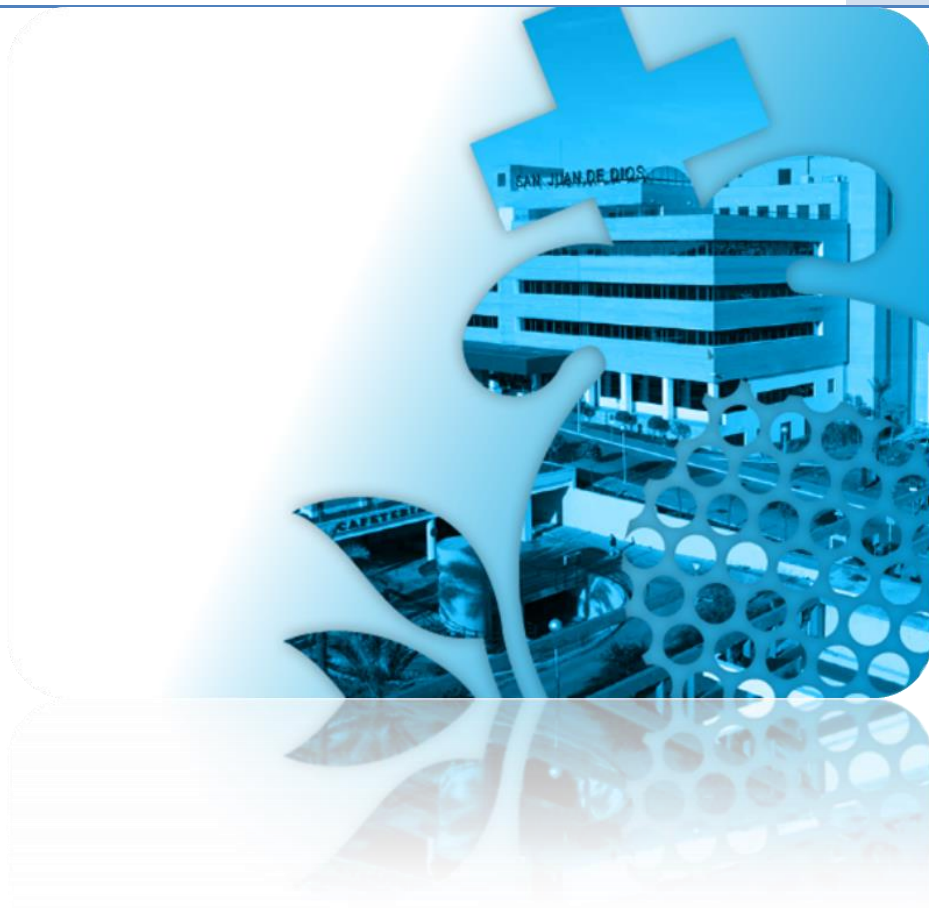

REVISIÓN	FECHA	RESUMEN DE LA REVISIÓN
M <sup>a</sup> Del Pilar Rodríguez Lara	8/07/2019	JULIO 2023

Elaborado por: MARIA DEL CARMEN FDEZ  
VIZCAINO  
Fecha: 01/08/2019

Aprobado por:  
M<sup>a</sup> Magdalena de Tovar Fernández  
Fecha: dd/mm/aaaa



HOSPITAL  
SAN JUAN DE DIOS  
DEL ALJARAFA



CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFA

## Contenido

AUTORES. ....	.....
DEFINICIÓN .....	.....
ÁMBITO DE ACTUACIÓN .....	.....
OPERATIVA: PASOS A SEGUIR .....	.....
LIMPIEZA DE FRIGORÍFICO.....	.....
OBSERVACIONES.....	.....




## AUTORES.

RESPONSABLE/COORDINADOR: APELLIDO / NOMBRE	TITULACIÓN	PUESTO QUE DESEMPEÑA	E-MAIL
<b>M<sup>a</sup> Del Pilar Rodríguez Lara</b>	DUE	Coordinación Enfermería Policlínica	mariapilar.rodriguez@sjd.es

APELLIDOS/NOMBRE	TITULACIÓN	PUESTO QUE DESEMPEÑA
<b>M<sup>a</sup> del Carmen Fernández Vizcaíno</b>	TCAE	TCAE SCCU

## DEFINICIÓN.

Los frigoríficos se utilizan para almacenaje de medicación y medidas físicas, que necesitan tener una temperatura controlada, por debajo de la temperatura ambiental. Se considera adecuado si el rango de valores esta entre **2º y 8º**. La temperatura actual debe estar dentro de este rango, puesto que se toma cuando el frigorífico ha podido estar cerrado más tiempo, así que es de prever que sea así. Si no es así, se ajustara la potencia del frigorífico (rueda interior que marca del 1-6), hasta conseguir este rango deseado.

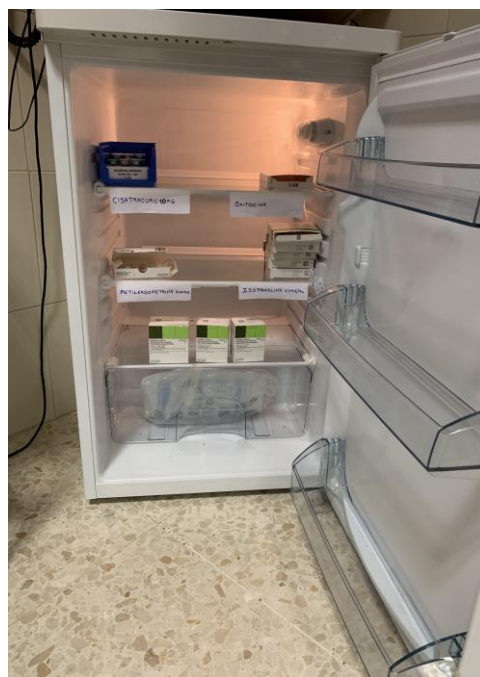

## AMBITOS DE ACTUACION.

Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, específicamente en la consulta de enfermería, emergencia, observación y UCI.

## OPERATIVA: PASOS A SEGUIR.

### Proceso para realizar el registro de temperaturas.

1. **CUANDO:** Entre las 08:00 y las 09:00.
2. **QUIEN:** Los TCAE asignados a la consulta de enfermería, Emergencia, STC, UCI respectivamente, que comienzan su jornada a las 08:00h.

### 3. **CÓMO:**

➤ En primer lugar se registra la temperatura actual, máxima y mínima en la hoja de registro de temperaturas.



DA	Time	Actual	Temp Min	Temp Max	Observations
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					

➤ El termómetro debe permanecer en HOLD para que muestre la temperatura correcta y actual del frigorífico.



➤ Para comprobar la temperatura máxima se pulsa una vez en la tecla señalada con la flecha.



➤ Para comprobar la temperatura mínima se le pulsa dos veces en la tecla mostrada en imagen.



- Una vez comprobadas todas las temperaturas, se deberá resetear tanto la temperatura máxima como mínima, dejando pulsada la tecla mostrada en imagen y esperando que salgan rallas discontinuas.



- Tras comprobar la temperatura se realiza el conteo de la medicación, registrando la cantidad en la hoja de registro de medicación.

FECHA:		TCAE:						
		L	M	X	P	V	E	S
PARACETAMOL SUP 500MG	20							
PARACETAMOL SUP 500MG	10							
METAMIZOL SUP 500 MG	20							
DIAMORFOL/CLORAL ANESTESICO SUP 10 MG	10							
DIAMORFOL SUP 10MG VIAL 10 MG	5							
OPTIFLUORESCINA-CONTRASTO 3 ML	7							
VACCINA TETANOS 7 DIFTERIA 86 A.S.M.	30							

## LIMPIEZA.

Los días 13 de cada mes aproximadamente, el TCAE referente de la C-9 o Emergencias se encarga de la limpieza del frigorífico.

## OBSERVACIONES.

El rango normal del frigorífico esta entre **2 y 8°C**, si la temperatura supera los 15°C o baja de los 0°C debemos:

1. Comprobar que la puerta no se ha quedado abierta y si no supera los 15 °, no habrá que tomar nueva medida.
2. Si está fuera de rango y persiste más de una hora debemos:
  - Comprobar el listado de medicamentos termosensibles que está en el anexo 3 del procedimiento y si la temperatura no afecta al medicamento, deberá escribir una incidencia y avisar al coordinador del SCCU.
  - En caso de duda de si la temperatura fuera de rango ha afectado a los medicamentos, se dejarán en la nevera fuera de uso, se registrará un parte en el GIM , se llamará a Juan Santín al **1113** y se informará al coordinador.
  - Si la temperatura ha podido afectar a los medicamentos, se consultará con el coordinador y con la farmacéutica quién valorará la estabilidad de cada medicamento y comunicará cuales hay que desechar y cuales pueden mantenerse.

**Es muy importante *COMPROBAR LA TEMPERATURA*** antes de realizar el contaje de la medicación ya que si se realiza al contrario se verán alterados los grados a los que se encuentra el frigorífico.